


Precautions for Unpacking

CX31


◎ In the condition immediately after the CX31 microscope frame is taken out of the package, the microscope comes with various protection measures to prevent deterioration in quality during transport. First remove the protective materials shown in the following illustration.

★ Since the microscope is a precision instrument, handle it with care so as not to apply impact to it.

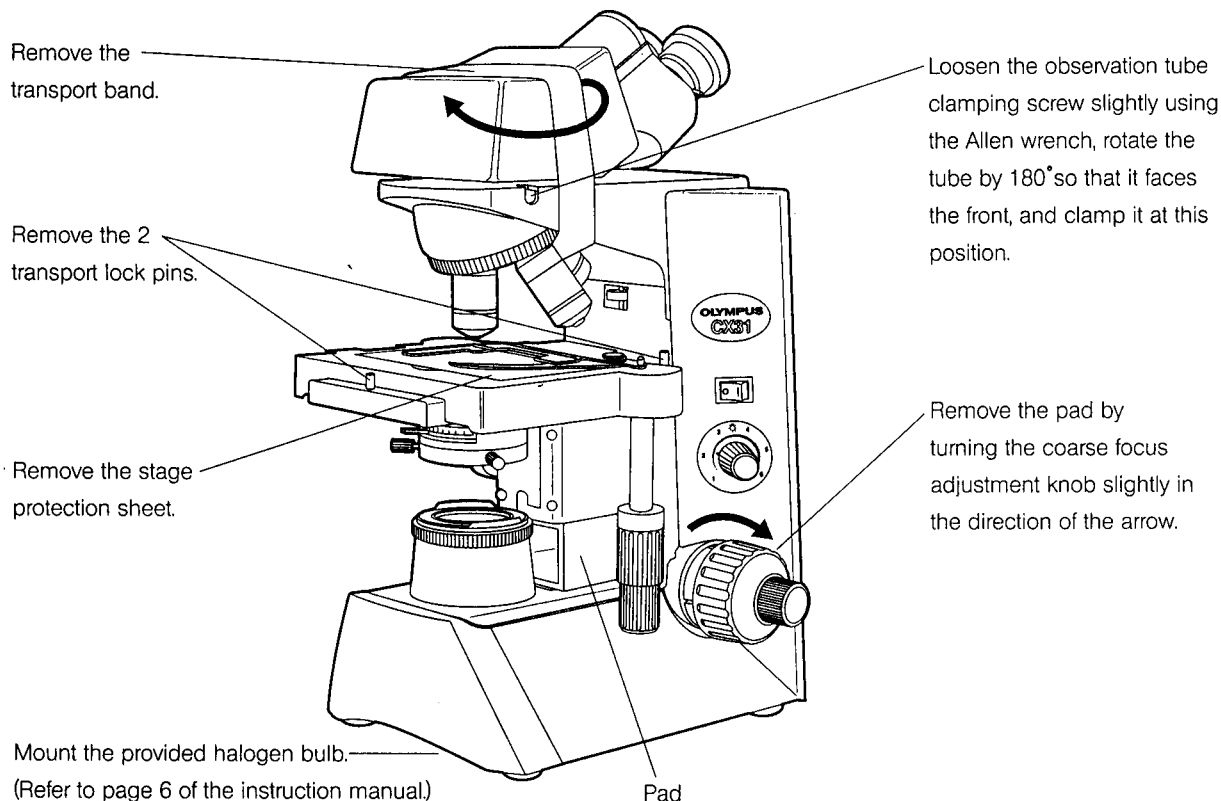

◎ The package includes the Instruction Manual, halogen bulb (6V, 30W), Allen wrench and immersion oil (when you purchase a 100X objective) as well as the CX31 microscope frame.

How to Hold the Microscope Correctly

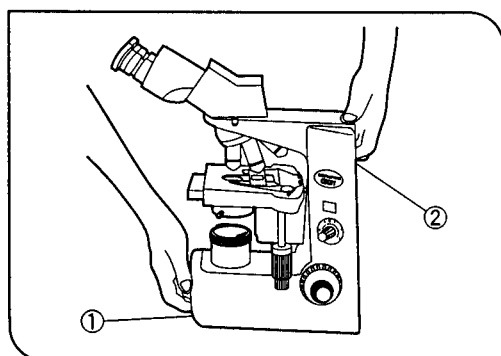

◎ When moving the microscope, carefully carry it with one hand under the base ① and the other hand holding at the recessed handle on the rear of the arm ② as shown in the illustration on the left.

★ Damage to the microscope will occur if you hold it by the stage, X-axis/Y-axis knob, binocular section of the observation tube, etc. Also make sure that specimen, filters, etc. do not fall off.

★ Sliding the microscope on the surface of the table may damage or tear off the rubber feet and/or scratch the table top surface.

OLYMPUS OPTICAL CO.,LTD.




A X 6 1 8 2

開梱に際してのお願い

○X31


◎梱包箱より顕微鏡CX31を取出すと、輸送時の品質劣化を防止するため、各種の保護処置がされています。
まず、下記イラストの保護材を取外してください。

★顕微鏡は精密機器ですので、衝撃を与えないよう、ていねいに取扱ってください。

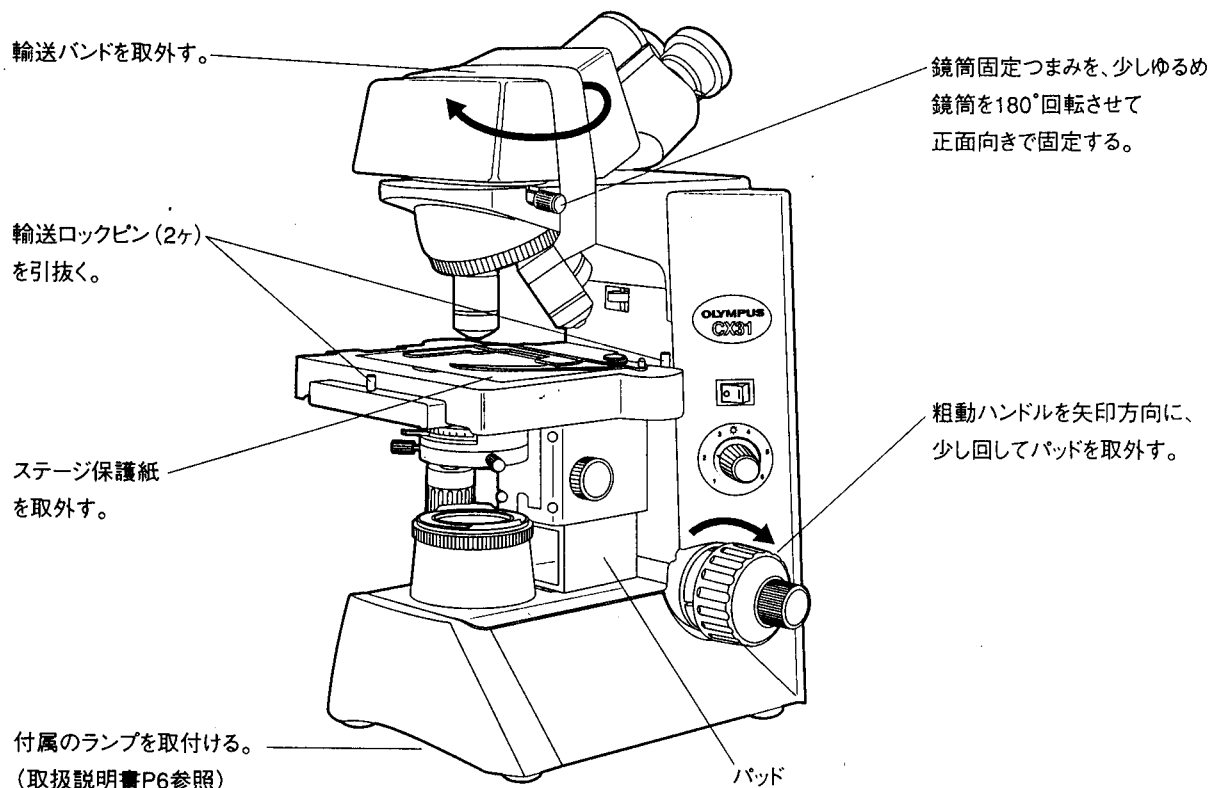

◎梱包箱には、顕微鏡CX31の他に、取扱説明書、ハロゲンランプ(6V30W)、イメージンオイル(100×対物レンズをお求めの場合)が入っています。

顕微鏡の正しい持ち方

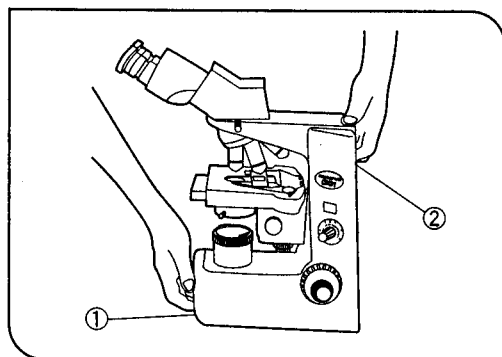

◎この顕微鏡を持ち運ぶ時は左図のようにベース底面①と背面の指掛け部②を持って慎重に移動してください。

★運搬の際にステージ・ステージ送りハンドルや鏡筒などを持つと破損の原因となりますので、持たないでください。また、標本、フィルタの落下にも注意してください。

★顕微鏡をずらすようにして移動させますと机上面の状態により、ゴム脚が破損、もしくは剥離する場合があります。

オリンパス光学工業株式会社